



CARDIOVIT AT-102

Le champion de l'ECG multifonctionnel haute performance qui satisfait les exigences les plus élevées et offre un excellent rapport qualité prix.

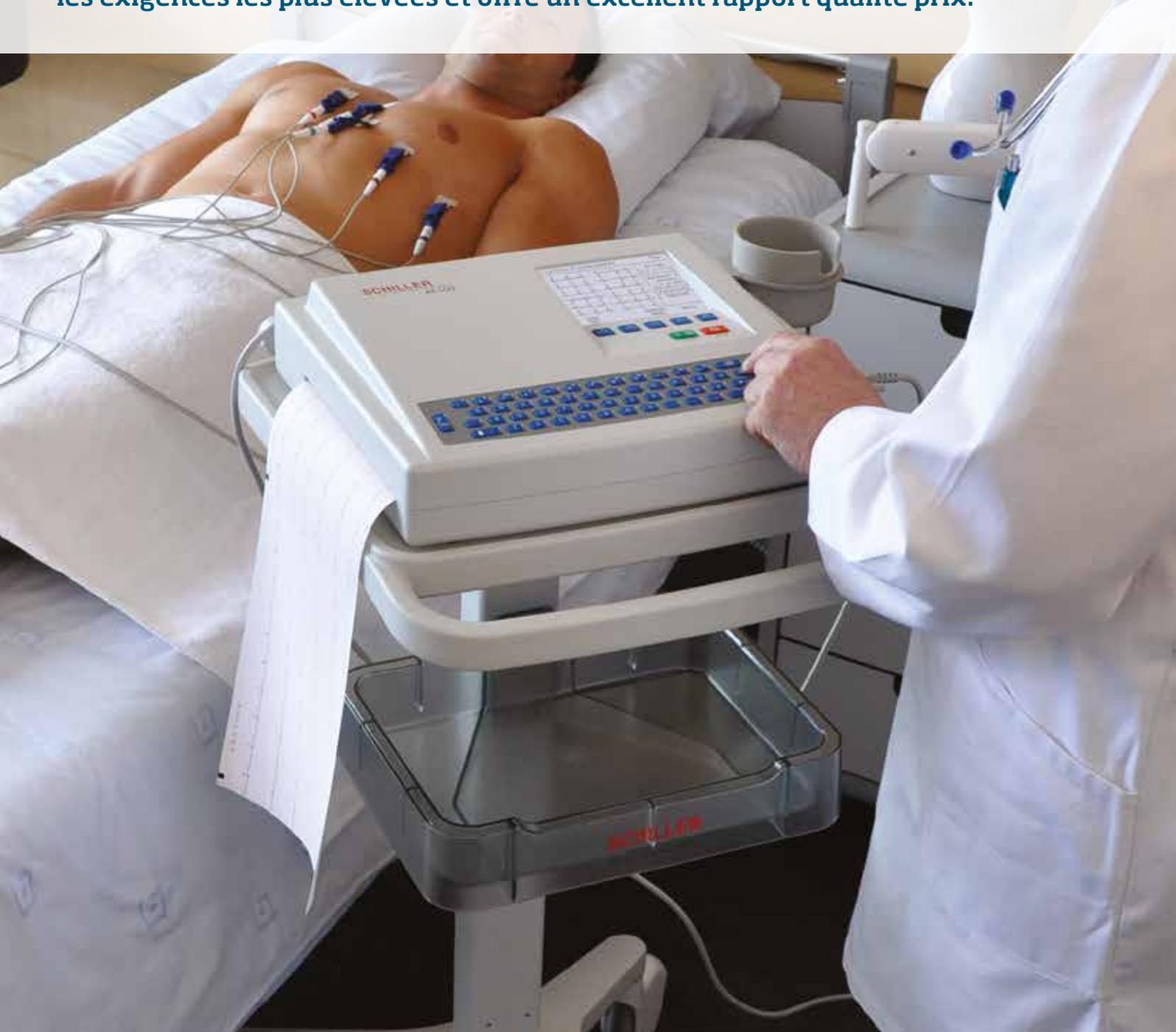

CARDIOVIT AT-102

Le CARDIOVIT AT-102 est un vrai champion de l'ECG multifonctionnel à 12 pistes qui permet d'enregistrer et d'analyser automatiquement les ECG de repos et les ECG d'effort. L'interface utilisateur familière et la manipulation intuitive accroissent la productivité et l'efficacité tout en garantissant un excellent rapport qualité prix.

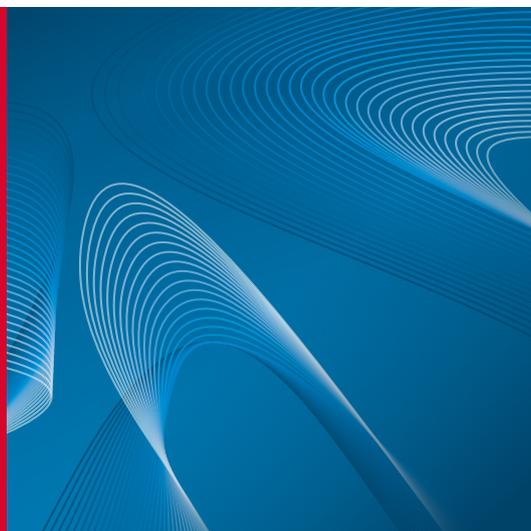

POUR DES ECG 12 PISTES PARFAITS

Le CARDIOVIT AT-102 est un système d'ECG de repos extensible, particulièrement adapté à l'utilisation de routine en cabinet médical, en environnement hospitalier ou en médecine d'urgence grâce aux touches de fonction directes qui rendent sa manipulation simple et intuitive. Le logiciel en option permet de faire évoluer le système très facilement vers une station de mesure ergométrique. En outre, le CARDIOVIT AT-102 peut être intégré à un système d'information hospitalier (SIH) à partir duquel des listes de travail pour les enregistrements d'ECG prévus peuvent être téléchargées sur le CARDIOVIT AT-102. L'utilisation mobile est assurée par l'accumulateur intégré à tout moment et en tout lieu.

L'imprimante haute résolution A4 en temps réel intégrée garantit le stockage à long terme des enregistrements d'ECG en qualité d'archive ; grâce au chargeur de papier automatique, l'impression est désormais encore plus facile. Fini le bidouillage du papier thermique!

L'écran graphique brillant du CARDIOVIT AT-102 peut afficher l'ensemble des 12 dérivations d'ECG par séquences de 3, 6 ou 12 qui peuvent être sélectionnées librement. De plus, un écran à cristaux liquides externe peut être connecté au CARDIOVIT AT-102 (en option).

Le logiciel de mesure et d'interprétation de SCHILLER est le logiciel de choix pour les hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques et instituts de recherche clinique en raison de sa qualité et de sa fiabilité excellentes.

• Logiciel de mesure et d'interprétation de SCHILLER pour enfants et adultes:

Analyse d'ECG à 12 dérivations offrant qualité et fiabilité sans avoir à faire de compromis - votre plus précieux outil pour obtenir un deuxième avis cliniquement fiable.

• Logiciel de thrombolyse de SCHILLER (SCHILLER STP):

Aide les médecins à prendre des décisions pour les soins précliniques et au service des urgences. En tenant compte de la médication, de l'âge, du sexe et de l'ECG d'un patient, le programme fournit des indications sur la probabilité d'une ischémie cardiaque aiguë ou d'un syndrome coronarien aigu (SCA). La suite logicielle SCHILLER STP est une option supplémentaire au logiciel d'interprétation assistée par ordinateur.

Avec le CARDIOVIT AT-102, toutes les fonctions ergométriques peuvent être contrôlées, y compris les ergomètres à bicyclette avec ou sans enregistrement de pression artérielle, et les tapis roulants. Les protocoles de tests d'effort standard sont incorporés et peuvent être modifiés individuellement selon le besoin.

• ECG d'effort de SCHILLER:

- Mesure ST à 12 pistes
- Possibilité de configurer des impressions intermédiaires ou finales
- Ergométrie entièrement automatique - intervention possible à tout moment



CONNECTIVITÉ

Le module de communication de SCHILLER (SCM) en option connecte l'AT-102 au système de gestion des données SEMA de SCHILLER, optimisant ainsi le déroulement des opérations et offrant davantage de fonctionnalités. Le module permet la communication bidirectionnelle non seulement avec SEMA mais aussi avec le système d'information hospitalier (SIH) et de dossiers médicaux électroniques (DME) via LAN.

Les données démographiques du patient peuvent être récupérées facilement et rapidement, minimisant ainsi la probabilité d'erreurs lors de l'entrée de données. Le scanner de code à barres en option accroît encore plus l'efficacité grâce à l'entrée automatisée des identifiants du patient.

Grâce à la fonction « liste de travail », une liste de consignes contenant les données démographiques du patient peut être téléchargée directement sur l'appareil. Ceci automatise le processus d'acquisition d'ECC et offre une traçabilité parfaite du déroulement des opérations depuis l'entrée de la consigne jusqu'à la facturation.

La transmission des enregistrements au système de gestion des données SEMA permet l'archivage à long terme de vos données et la gestion efficace des patients et enregistrements grâce à des outils de recherche et d'édition faciles à utiliser. Les interfaces standard via HL7, GDT et XML renforcent la capacité du système SEMA à s'intégrer dans une solution de systèmes plus large, évitant ainsi les îlots d'information isolés.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
adv@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E5-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bells Hill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

