

# Ambu® WhiteSensor WSP30

Électrode ECG - à usage unique




## Bénéfices clés

- Électrode de petite taille/taille moyenne adaptée à l'usage pédiatrique et adulte
- Gel solide hautement conducteur et forte adhésivité pour un signal de qualité optimale
- Support en mousse confortable

## Ambu® WhiteSensor WSP30

L'électrode de petite taille/taille moyenne Ambu WhiteSensor WSP30 est dotée d'un gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitoring ECG pédiatrique et adulte.

Grâce au support externe en mousse flexible et à la forme en goutte d'eau, l'électrode s'adapte parfaitement à la plupart des patients et offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.

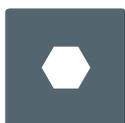

Gel solide



Support en mousse

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

# Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (l x L en mm)	35 x 30
Surface adhésive (en mm <sup>2</sup> )	511
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	1
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur (en mm <sup>2</sup> )	44
Surface du gel/zone de mesure (en mm <sup>2</sup> )	201
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA	≤ 150 Ω
Tension continue de polarisation	≤ 1 mV
Tension résiduelle de défibrillation	≤ 15 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	≤ 0,3 mV/s
Impédance après SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Recueil instabilité et bruit interne	≤ 90 μV
Recueil tolérance courant (après 8 h)	≤ 15 mV
Environnement	
Électrode sans PVC	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparent	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de validité	
En sachet ouvert	1 mois
En sachet scellé	24 mois*

\*à compter de la date de fabrication

## Matériaux

Électrode		Conditionnement standard	
Biocompatible	Oui	Nombre d'électrodes/sachet	50
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Quantité boîte/carton	600/7200
Support externe	Mousse de polyéthylène (améliorée)	Quantité minimale de commande	600/7200
Adhésif externe	Polyacrylate		
Connecteur	Bouton pression en acier inoxydable	Options	
Plaquette	PET	Connecteurs	S
Conditionnement		Attention	
Pochette	Polyester/ Aluminum/ Polyéthylène	Usage unique seulement	
Carton et emballage extérieur	Carton ondulé		

## Configurations disponibles

Numéro de référence	Quantité/plaquette	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton
WSP30-00-S/50	5	50	600	7200

- Produit
- Longueur du câble
- Connecteur

Sales Company  
**Ambu sarl**  
 43-45 Rue d'Armagnac  
 CS 72073  
 33088 Bordeaux France  
 Tél. : (33) 05 57 92 31 50  
 Fax : (33) 05 57 92 31 59  
 Site internet : www.ambu.fr

Manufacturer  
**Medico Electrodes International Ltd.**  
 Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29,  
 Noida Special Economic Zone, Noida,  
 Uttar Pradesh, 201305, India.

**Ambu BV**  
 4 Rue de la Presse  
 1000 Bruxelles  
 Belgique  
 Tél. : +32 02 227 2737  
 Fax : +32 02 218 31 41  
 Site internet : www.ambubel.be

**CE** États-Unis :  
 sur ordonnance uniquement